



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

宁波海关技术中心

检 验 报 告

检 验 报 告 编 号 201900004327M
样 品 名 称 双性水®抑菌洗液
送 检 单 位 火人京创（北京）医疗器材有限公司
检 验 类 别 委托检验

2020年 01月 08日

宁波海关技术中心

送 检 单



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

宁波海关技术中心
检验报告

样品受理编号: 1900088233

报告编号: 201900004327M

第 1 页/共 4 页

样品名称	双性水®抑菌洗液	商 标	双性水®
送检单位	火人京创(北京)医疗器材有限公司	样品数量及规格	260ml, 260ml/瓶
生产单位	南京三盾药业有限公司	样品性状	无色液体
生产日期或批号	20190430	接样日期	2019-05-13
检验类别	委托检验	检验完成日期	2019-05-22

检验依据:

有效氯:《消毒技术规范》卫生部2002年版2.2.1.2.1。

pH值:《消毒技术规范》卫生部2002年版2.2.1.4。

铅、砷、汞:《化妆品安全技术规范》2015版。

检验结论:


该样品的有效氯含量平均值为0.0549 g/L。

该样品的pH值平均值为6.2。

该样品的铅含量为未检出(<2 mg/kg), 砷含量为未检出(<1 mg/kg), 汞含量为未检出(<0.3 mg/kg)。

备 注: 1.本报告代替2019年05月22日所发的201900004327报告, 原报告作废。
2.样品名称由双性水®抑菌液变更为双性水®抑菌洗液。
3.原宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心现改名为宁波海关技术中心。

授权签字人

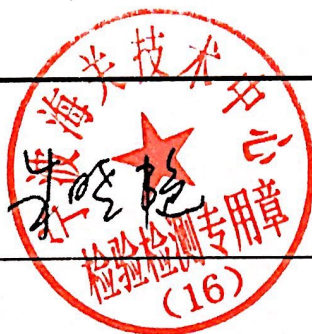

2020-01-08



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

宁波海关技术中心 检验报告

样品受理编号: 1900088233 报告编号: 201900004327M 第 2 页/共 4 页

样品名称 双性水®抑菌洗液 接样日期 2019-05-13
检验项目 有效氯 检验完成日期 2019-05-22

一、器材

1. 试验样品: 双性水®抑菌洗液, 批号: /。
2. 器材: 25 mL 滴定管。
3. 试剂名称与级别: 硫酸 (分析纯)、碘化钾 (分析纯)、淀粉 (分析纯)、蒸馏水。
4. 标准溶液名称及浓度: 硫代硫酸钠标准滴定液, 浓度为 0.01008 mol/L。

二、方法

1. 检测依据: 《消毒技术规范》卫生部 2002 年版 2.2.1.2.1。
2. 检验环境温度 22 °C, 相对湿度 50 %。

三、结果

该样品的有效氯含量平均值为 0.0549 g/L, 结果列于表 1。

表 1 有效氯含量测定结果

样品批号	样品序号	样品消耗标准溶液 用量 (mL)	有效氯含量 (g/L)	各批次平均值 (g/L)
/	1-1	7.65	0.05453	0.0549
	1-2	7.75	0.05524	
	1-3	7.70	0.05489	

四、结 论

该样品的有效氯含量平均值为 0.0549 g/L。

授权签字人



2020-01-08



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

宁波海关技术中心 检验报告

样品受理编号: 1900088233

报告编号: 201900004327M

第 3 页/共 4 页

样 品 名 称 双性水®抑菌洗液 接 样 日 期 2019-05-13
检 验 项 目 pH 值 检 验 完 成 日 期 2019-05-22

一、器材

1. 试验样品: 双性水®抑菌洗液, 批号: /。
2. 仪器设备: pH 计, 型号为 SevenMulti。

二、方法

1. 检测依据: 《消毒技术规范》卫生部 2002 年版 2.2.1.4。
2. 检验环境温度 22 °C, 相对湿度 50 %。

三、结 果

该样品的 pH 值平均值为 6.2, 结果列于表 2。


表 2 pH 值测定结果

样品批号	样品序号	pH 值	各批次平均值
/	1-1	6.20	6.2
	1-2	6.20	

四、结论

该样品的 pH 值平均值为 6.2。

授权签字人

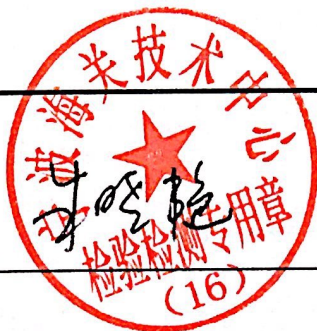

2020-01-08



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

宁波海关技术中心 检验报告

样品受理编号: 1900088233

报告编号: 201900004327M

第 4 页/共 4 页

样 品 名 称 双性水®抑菌洗液 接 样 日 期 2019-05-13
检 验 项 目 铅、砷、汞 检 验 完 成 日 期 2019-05-22

一、器材

1. 试验样品: 双性水®抑菌洗液, 批号: /。
2. 仪器设备: 电子天平, 型号为 XS205DU。
微波消解仪, 型号为 Multiwave PRO。
ICP/MS(等离子质谱仪), 型号为 7800。
3. 试剂名称与级别: 硝酸(分析纯)、过氧化氢(分析纯)、蒸馏水。

二、方法

1. 检测依据: 《化妆品安全技术规范》2015 版。
2. 检验环境温度 22 °C, 相对湿度 50 %。

三、结 果

该样品的铅含量为未检出 ($<2 \text{ mg/kg}$), 砷含量为未检出 ($<1 \text{ mg/kg}$), 汞含量为未检出 ($<0.3 \text{ mg/kg}$), 测定结果列于表 3。

表 3 铅、砷、汞测定结果

样品批号	检测项目	检测结果	GB 27954-2011 限量
/	铅	未检出 ($<2 \text{ mg/kg}$)	$<40 \text{ mg/L}$
	砷	未检出 ($<1 \text{ mg/kg}$)	$<10 \text{ mg/L}$
	汞	未检出 ($<0.3 \text{ mg/kg}$)	$<1 \text{ mg/L}$

四、结 论

该样品的铅含量为未检出 ($<2 \text{ mg/kg}$), 砷含量为未检出 ($<1 \text{ mg/kg}$), 汞含量为未检出 ($<0.3 \text{ mg/kg}$)。

授权签字人

2020-01-08